

Indelning av sittdynor

HT 2023

Information om funktionsområde 181006 - Sittdynor och underlägg

AA Dynor för korttidssittande

Definition: Plana dynor som genom material fördelar tryck över sittytan.

AB Tryckfördelande dynor

Definition: Dynor som genom form och/eller material fördelar tryck över sittytan.

Information om funktionsområde 043303 - Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention

AC Tryckavlastande dynor

Definition: Dynor som genom form och/eller material avlastar tryck mot specifik kroppsdel och/eller del av kroppsdel.

AD Positionerande dynor

Definition: Dynor som genom form, material eller individuell anpassning, kompenserar eller korrigerar deformitet.

AE Positionerande och tryckfördelande dynor


Definition: Dynor som genom form, material eller individuell anpassning, kompenserar eller korrigerar deformitet samt fördelar tryck över sittytan.

AF Positionerande och tryckavlastande dynor

Definition: Dynor som genom form, material eller individuell anpassning, kompenserar eller korrigerar deformitet samt avlastar tryck mot specifik kroppsdel och / eller del av kroppsdel.

2023-10-16 Sara Enlund & Niusha Behjati

181006 - AA Korttidssittande

Produkt	Leverantör	Information		
Bima Spinner	Bima Plastteknik AB	<p>Avsedd för transportrullstol med plansits, korttidssittande, svängd bakkant. Överdrag svart laminerad plysch med motsatt luggriktning motverkar framåtgångning.</p> <p>Max brukarvikt: 50 - 125 kg beroende på storlek på sittdynan. Sittbredd: 24 - 50 cm Höjd: 3 cm och 5 cm.</p>		1:a handsval

Måttförklaring till Bima sittdynor:

Dynor med rundad bakkant Sitsbredd(cm) x Sitsdjup på sidan(cm)/Sitsdjup på mitten(cm) x Höjd(cm)
 Tidigare mått från Bima angavs Sitsbredd(cm) x Sitsdjup på sidan(cm) x Höjd (cm)

181006 - AB Tryckfördelande

Produkt	Leverantör	Information		
Bima Base Seat	BIMA Plastteknik AB	<p>Bima Base Seat är en sittdyna för brukare med god känsel. Komfortabel och stadig. Dynan är uppbyggd av 2 olika skumgummi, fast polyeter och ett mjukt sittskikt. Luftigt inkontinensskyddat överdrag. Bendelare. Finns som kupad i beställningsportalen.</p> <p>Max brukarvikt: 100 – 150 kg Sittbredd: 25 -60 cm Höjd: ca 8 cm.</p>		1:a handsval
Jay Combi Soft P	Sunrise Medical AB	<p>Stabil, komfortabel och tryckfördelande, Lämplig för personer som har möjlighet att ändra kroppsställning själv.</p> <p>Max brukarvikt: 150 kg. Sittbredd: 25 – 60 cm Höjd: 6 cm</p> <p>Övrigt: Svår att anpassa/skära i. De mindre storlekarna fungerar bra för att positionera brukaren.</p>		2:a handsval
Concept Latus	Care of Sweden	<p>För tyngre brukare. Dynan har förstärkt bottenplatta, sidostöd, bendelare, sittgrop och ett vätsketätt ytskikt.</p> <p>Max brukarvikt: 250 - 270 kg, beroende på bredd, men upp till 270 kg i de bredaste storlekarna. Sittbredd: 50 – 65 cm Höjd: 7 cm</p>		2:a handsval

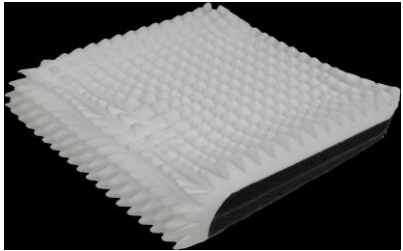
043303 - AC Tryckavlastande

Produkt	Leverantör	Information		
Bima Allround	BIMA Plastteknik AB	<p>Tryckavlastande sittdyna med sittgrop (inkl. ext inkohätta) och CONFOR®-foam, hög stabilitet, god luftgenomsläpplighet samt bra tryckfördelning.</p> <p>Max brukarvikt: 100 - 150 kg Sittbredd: 35 - 60 cm Höjd: 7 cm</p> <p>Övrigt: Är lätt att anpassa i skummet genom att fräsa ut för sparkbenet. Skummet i sittgropen blir hårdare vid kyla</p>		<p>1:a handsval</p>
Bima Cubetech	BIMA Plastteknik AB	<p>Sittdyna med höga lateralstöd och utpräglad bendelare. Uppbyggd av kuber med olika densitet i skummet. Finns även för barn.</p> <p>Max brukarvikt: 125 - 150 kg Sittbredd: 35 - 60 cm Höjd: Plan 8,5 cm och Kupad 9,4 cm. Från sittbredd 52,5cm blir sitthöjden + 1 cm.</p> <p>Övrigt: Tänk på att lateralstöden kan vara i vägen för brukare som gör låga förflyttningar.</p>		<p>1:a handsval</p>

Bima Cubekick	BIMA Plastteknik AB	<p>Används av brukare som sitter i allround- eller aktivrullstol och som sparkar sig fram med höger eller vänster ben.</p> <p>Dynan är anpassad för personer med ett paretiskt ben t.ex. efter en stroke. Högt lateralstöd förhindrar abduction på den sida som är paretiskt. Bima cubekick är tryckavlastande och används när det finns risk för trycksår. Stöd för bäckenet på sparksidan.</p> <p>Höjd och max brukarvikt: Se Bima Cubetech.</p>		2:a handsval
Bima Fjäder	BIMA Plastteknik AB	<p>Sittdyna med spiralfjädrar i sittgrop. Används med fördel i elrullstol för utomhusbruk.</p> <p>Max brukarvikt: 125 - 150 kg. Sittbredd: 35 - 60 cm Höjd: 10 cm.</p>		2:a handsval
Bima XXL/ specialmått	Bima Plastteknik AB	<p>Sittdyna avsedd för stora och tunga brukare, stadig bas och sittgrop med CONFOR®foam samt bendelare.</p> <p>Max brukarvikt: 180 - 250 kg Sittbredd: 47 - 80 cm Höjd: 10 cm</p> <p>Bima Special kan måttbeställas i Beställningsportalen. Måtten anges i kommentaren i sammanställningen.</p>		2:a handsval


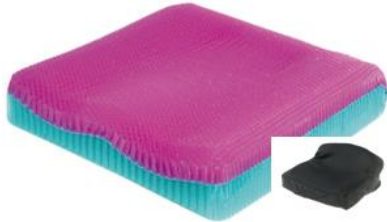

Bima formsits barn	Bima Plastteknik AB	<p>Barndyna. Tryckavlastande sittdyna för små och lätta brukare sittgrop av CONFOR®foam, liten bendelare.</p> <p>Max brukarvikt: 20 - 45 kg Sittbredd: 25 - 40 cm Höjd: 5,5 cm</p>		2:a handsval
Stimulite Sport	Rehab Shop Göran Sjödén	<p>Plan dyna med glatt överdrag som underlättar förflyttningar. Används ofta i aktivrullstolar. Luftig, stabil och låg. Vikt 1,5 kg.</p> <p>Max brukarvikt: 130 kg Sittbredd: 33 - 51 Höjd: 5 cm Övrigt: Används ofta i aktivstolar när låg höjd är önskvärt. Kan anpassas enkelt.</p>		2:a handsval
Stimulite Smart	Rehab Shop Göran Sjödén	<p>Tunn och lätt sittdyna. Luft cirkulerar lätt genom dynan. Vikt 1kg. För brukare som behöver egenskaperna som Stimulite sport har, men som har extra känslig hud.</p> <p>Max brukarvikt: 130 kg Sittbredd: 33 - 51 cm Höjd: 5 cm.</p> <p>Övrigt: Används ofta i aktivstolar när låg höjd är önskvärt. Kan anpassas enkelt.</p>		2:a handsval


043303 AD Positionerande dynor

Produkt	Leverantör	Information		
AireRx Adjust	Salubrious AB	<p> AireRx Adjust är en sittdyna i mellanrisksegmentet. AireRx Adjust ger brukaren stabilitet, positionering och korrigeringsmöjligheter med hjälp av korrigeringsplattorna i botten. Dynan är lätt i vikt, har bendelare och sidostöd. Extra tryckavlastande skum finns under sittbenen, svanskota och underliv. Plastsyddet runt dynan är inkosyddet. </p> <p> Max brukarvikt: 140 kg Sittbredd: 34 – 59 cm Höjd ca 11,5 cm </p>		<p>1:a handsval</p>

043303 AE Positionerande och tryckfördelning

Jay Lite	Sunrise Medical AB	<p>Fast botten med mjukare material i sittdelen. Lätt sittdyna, ca 1 kg. Luftig material som andas</p> <p>Max brukarvikt: 150 kg Sittbredd: 35 – 60 cm Höjd: 8 cm</p> <p>Övrigt: Flera brukare har suttit igenom överdraget. Risk att brukare med bakåttippat bäcken trycker mot kanten på sittgropen.</p>		1:a handsval
Stimulite Classic	Rehab shop Göran Sjödén	<p>Dynan har tre olika skikt erbjuder individuellt anpassning och form, fördelar tryck och ger stabilitet. Plan sittdyna, låg vikt. Finns även som extra sensitive för brukare med extra känslig hud.</p> <p>Max brukarvikt: 40 - 130 kg Sittbredd 36 – 56 cm Höjd: 6 cm.</p>		2:a handsval
Stimulite Classic Bariatric	Rehab Shop Göran Sjödén	<p>Plan sittdyna för tyngre brukare. Tryckavlastande och utjämnande. Dynan består av tre olika skikt som fördelar tryck och ger stabilitet.</p> <p>Max brukarvikt: 120 - 360 kg Sittbredd: 51 – 81 cm Höjd: 7 cm</p>		2:a handsval

Stimulite Contoured	Rehab Shop Göran Sjödén	<p>En sittgrop med en tryckutjämnande område för att omsluta sittbensknölar och svanskota och undvika att "sitta igenom".</p> <p>Den mjukare överdelen övergår till en fastare underdel för ökad stabilitet.</p> <p>Lårstöd och bendelare för bra benpositionering utan att försvåra förflyttningar i sidled.</p> <p>Finns också som extra sensitive, för brukare med extra känslig hud.</p> <p>Max brukarvikt: 40 - 130 kg Sittbredd: 36 - 51 cm Höjd: 8 cm Övrigt: Finns med smal och bred sittgrop</p>		2:a handsval
Stimulite Pediatric Contoured	Rehab Shop Göran Sjödén	<p>Barndyna.</p> <p>Vikt 0,5 - 1 kg. Max brukarvikt: 50 kg, beroende på storlek. Sittbredd: 26 - 41 cm Höjd: ca 7 cm.</p> <p>Övrigt: Vid spasticitet kan denna hjälpa tack vare sin sittgrop.</p>		2:a handsval
Stimulite Corbee (classic barndyna)	Rehab Shop Göran Sjödén	<p>Plan barndyna, med rund botten. Vikt 0,5-1 kg.</p> <p>Max brukarvikt: 50 kg, beroende på storlek på sittdynan. Sittbred: 26 - 41 cm Höjd: 5 cm.</p>		2:a handsval



<p>Stimulite Slimline</p>	<p>Rehab Shop Göran Sjödén</p>	<p>Lätt konturerad sittdyna. Vikt ca 1 kg. Finns också i extra sensitive, för brukare med extra känslig hud.</p> <p>Max brukarvikt: 40 - 130 kg Sittbred: 36 - 51 cm Höjd: 6 cm.</p>		<p>2:a handsval</p>
----------------------------------	------------------------------------	--	---	-------------------------

Stimulite sittdynor kan upplevas hårda i början. Att tvätta sittdynan gör att den kan upplevas mjukare och den får tillbaka sin "stuns".

Tvätta gärna 1ggr/v.

Inkontinensskydd finns och läggs in under sittdynan i överdraget, ska enligt leverantören kunna suga upp 1 liter vätska.

043303 AF, Positionerande och tryckavlastande

Produkt	Leverantör	Information		
ROHO Quatro Select	Permobil AB	<p>Luftdyna som används för avlastning. Kan användas till sårkategori 4. Finns i 2 olika höjder, 6cm som används i förebyggande syfte och 10 cm som används till brukare som löper hög risk att utveckla trycksår.</p> <p>Max brukarvikt: Obegränsad Sittbredd: 32,5 – 67 cm Höjd: 6cm eller 10 cm.</p>		1:a handsval
Vicair Adjuster O2	Invacare AB	<p>Sittdyna med tetraformade softcells. Indelad i 5 sektioner. Kan justeras för benlängdsskillnad och bäckentipning. Finns i sittbredd 35-50cm.</p> <p>Dynan har luftgenomsläppligt material och kan tvättas i maskin 60 grader (Hela dynan)</p> <p>Max brukarvikt: 250 kg Sittbredd: 35 – 60 cm (6cm: 35 – 53 cm) Höjd: 6 cm eller 10 cm.</p> <p>Övrigt: Plocka max ur 15st softcells.</p>		1:a handsval

Vicair Vector junior	Invacare AB	<p>Barndyna. Indelad i 9 sektioner där de två sidosektionerna ger ökad stabilitet för bäckenet och förhindrar utåtrotation i höftlederna. De främre sektionerna stabiliserar låren, förhindrar inåtrotation och motverkar nedglidning. Indelad i 9 sektioner</p> <p>Max brukarvikt: 100 kg Sittbredd: 25 – 35 cm Höjd: 5 - 7 cm.</p>		1:a handsval
Vicair Multifunctional	Invacare AB	<p>Utformad som Vicair Adjuster O2. Indelad i 5 sektioner men med längre sektioner bak. För brukare med behov av långt sittdjup. Sittdjup 52cm Beställ också överdrag i Beställningsportalen.</p> <p>Max brukarvikt: 250 kg Sittbredd: 35 – 60 cm Höjd: 8 cm.</p>		2:a handsval
Vicair Vector O2	Invacare AB	<p>Sittdyna med Soft Cells. 9st fack med bendelare och bäckenstöd.</p> <p>Dynan är i luftgenomsläppligt material och kan tvättas i maskin 60 grader.</p> <p>Max brukarvikt: 250 kg Sittbredd: 35 – 60 cm Höjd: 10 cm. (Finns även i 6 cm höjd då som Enstaka ärende)</p>		2:a handsval

Vicair Adjuster Bariatric	Invacare AB	<p>För tunga brukare. Utformad som Vicair Adjuster. Indelad i 5 sektioner.</p> <p>Max brukarvikt: 500 kg. Sittbredd: 60 – 65 cm Höjd: 10 cm.</p>		2:a handsval
Jay Balance	Sunrise Medical	<p>Sittdyna med bas i fast skum och gelé i sittgroppen.</p> <p>Max Brukarvikt: 150 – 225 kg. Sittbredd: 34 – 60 cm Höjd: 7,5 cm i framkant. (Finns även i 10 cm)</p> <p>Övrigt: Blir väldigt kall att sitta på om den legat ute.</p>		2:a handsval
Roho Hybrid Elite	Permobil AB	<p>Dyna med bas i stabilt skum med inlägg av ROHO i sittgropp. Finns i tvåkammare. (hö & vä sida)</p> <p>Max brukarvikt: 225 kg Sittbredd: 35 – 60,5 cm Höjd: ca 10 cm.</p> <p>Övrigt: Kan anpassas. Brukare med bakåttippat bäcken kan känna av kanten till sittgroppen.</p>		2:a handsval

<p>Starlock 10 & 13 cm</p>	<p>Etac</p>	<p>Luftdyna med celler där varje cell kan låsas. Kan användas för positionering/avlastning.</p> <p>Max brukarvikt: Obegränsad. Höjd: 10 - 13 cm Sittbredd: 26 - 56 cm</p> <p>Övrigt: Optimal vid svår trycksårsproblematik. Lång leveranstid för större stl.</p>		<p>2:a handsval</p>
<p>Varilite Evolution</p>	<p>Anatomic Sitt</p>	<p>Kombinerad luft/skumdyna. 3 olika sorters skum med extra avlastning under sittbenen. Har en luftventil som används för att reglera dynans utformning.</p> <p>Max brukarvikt: 300 kg. Sittbredd: 30 - 60 cm Höjd: 9,5 cm när dynan är luftfylld.</p> <p>Övrigt: Är helt rak i bakkant, vilket gör den svår att få in mellan ryggrören i rullstolen.</p>		<p>2:a handsval</p>
<p>Varilite Zoid</p>	<p>Anatomic Sitt</p>	<p>För aktiva brukare och sportutövare. Zoiddynan är 7 cm hög i luftfyllt läge vilket tillsammans med det kilformade skummet runt kanten ger ett extra stabilt sittande. Zoid är smalare i framkant än i bakkant och utan bendelare.</p> <p>Max brukarvikt: 300 kg. Sittbredd: 30 - 50 cm Höjd: 7 cm när dynan är luftfylld.</p>		<p>2:a handsval</p>